

光束质量分析仪

Duma Optronics 公司于 1989 年成立于以色列，是一家专业从事激光光束自动化测量系统研发和生产的公司。其生产的光束质量分析仪产品类型丰富，功能全面。

BeamOn HR:

- 采用高分辨的 12 位 CCD 相机
- 测量激光束光斑大小、位置、功率和光强分布
- 既可测连续光，又可测脉冲光
- 波长范围：350—1310nm
- 探测器面积：7.6×6.2mm

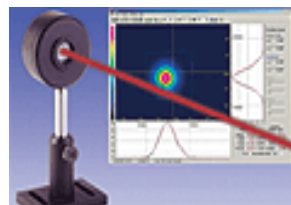


型号:

BeamOnHR	相机，支架，衰减片，6V 电源，软件
----------	--------------------

BeamOn:

- 测量激光束光斑大小、位置、功率和光强分布
- 既可测连续光，又可测脉冲光
- 波长最小可达 190nm，最大可达 1550nm
- 探测器面积：6.47×4.83mm



型号:

BeamOn-VIS	带 PCI 板卡或 USB2.0 的相机(波长范围：350—1100nm)，支架，衰减片，软件
BeamOn-IR-1310	带 PCI 板卡或 USB2.0 的相机(波长范围：350—1310nm)，支架，衰减片，软件



Rayscience

Rayscience Optoelectronic Innovation Co.,Ltd

上海瞬渺光电技术有限公司

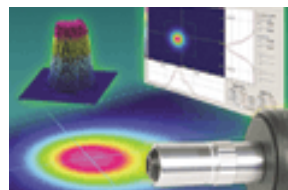
Tel: 86 21 34635258/59/61/62 Fax: 86 21 34635260

Mail: saleschina@rayscience.com

BeamOn-UV	带 PCI 板卡或 USB2.0 的相机(波长范围: 190—1100nm), 支架, 衰减片, 软件
BeamOn-IR-1550	带 PCI 板卡或 USB2.0 的相机(波长范围: 350—1100nm, 1550nm± 50nm), 支架, 衰减片, 软件

μBeam:

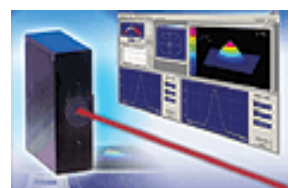
- 测量微米级大小光束 (0.5μm)
- 高分辨率 CCD (80 万像素)
- 物镜放大倍数: 100x、50x、20x、10x
- 波长: 350nm-1310nm

**型号:**

μBeam-X-USB2.0	相机, USB2.0 接口, 物镜, 软件
μBeam-X-SA	相机, 显示模块, 物镜, 软件
X	x10、x20、x50、 x100 等不同倍率的物镜

Beam Analyzer:

- 采用旋转刀口法分析光束
- 精度高, 动态范围大, 速度慢
- 波长最小可达 190nm, 最大可达 1800nm

**型号:**

Rayscience

Rayscience Optoelectronic Innovation Co., Ltd

上海瞬渺光电技术有限公司

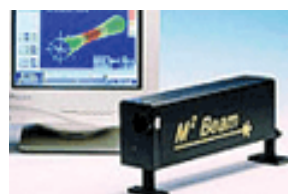
Tel: 86 21 34635258/59/61/62 Fax: 86 21 34635260

Mail: saleschina@rayscience.com

BA3-Si	PCI 板卡, 支架, 软件, 3 刀片的探头(口径: 5mm, 波长范围: 350—1100nm)
BA7-Si	PCI 板卡, 支架, 软件, 7 刀片的探头(口径: 9mm, 波长范围: 350—1100nm)
BA3-UV	PCI 板卡, 支架, 软件, 3 刀片的探头(口径: 5mm, 波长范围: 190—1100nm)
BA7-UV	PCI 板卡, 支架, 软件, 7 刀片的探头(口径: 9mm, 波长范围: 190—1100nm)
BA3-IR3	PCI 板卡, 支架, 软件, 3 刀片的探头(口径: 3mm, 波长范围: 800—1800nm)
BA7-IR3	PCI 板卡, 支架, 软件, 7 刀片的探头(口径: 3mm, 波长范围: 800—1800nm)
BA3-IR5	PCI 板卡, 支架, 软件, 3 刀片的探头(口径: 5mm, 波长范围: 800—1800nm)
BA7-IR5	PCI 板卡, 支架, 软件, 7 刀片的探头(口径: 5mm, 波长范围: 800—1800nm)

M2 Beam:

- 测量激光束 M2 值、束腰大小、位置、功率和光强分布
- 波长最小可达 190nm, 最大可达 1800nm
- 功率: 100uW-1W (Si), 100uW-5mW(InGaAs、UV)
- 可测光斑最大可达 15mm

**型号:**

M2-Beam-Si	装有 10mmX10mm 的 7 刀片的探头 (波长范围: 350—1100nm) 的测量模块, 显示模块
M2-Beam-IR-3mm	装有直径为 3mm 的 7 刀片的探头 (波长范围: 800—1800nm) 的测量模块, 显示模块
M2-Beam-IR-5mm	装有直径为 5mm 的 7 刀片的探头 (波长范围: 800—1800nm) 的测量模块, 显示模块
M2-Beam-UV	装有 10mmX10mm 的 7 刀片的探头 (波长范围: 190—1100nm) 的测量模块, 显示模块



Rayscience

Rayscience Optoelectronic Innovation Co.,Ltd

上海瞬渺光电技术有限公司

Tel: 86 21 34635258/59/61/62 Fax: 86 21 34635260

Mail: saleschina@rayscience.com